


Medida del patrón YLID con microfuelle de Cu 07-11-2012

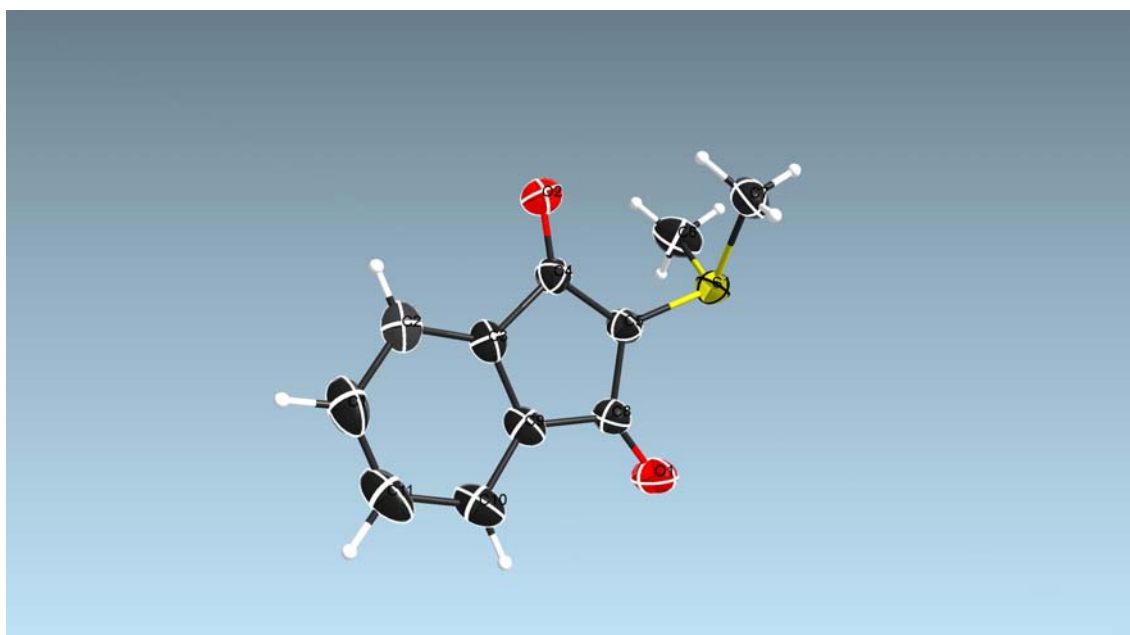

Valores obtenidos al realizar la medida resolución de la estructura del patrón mediante el software Xpresso utilizando las condiciones por defecto del mismo para un cristal de C₁₁H₁₀O₂S con unas dimensiones de 0.2 x 0.2 x 0.2 mm.

a = 5.9640(2) Å	GOF = 0.797
b = 9.0382(2) Å	R1 = 2.55 %
c = 18.3912(5) Å	wR2 = 8.17 %

Todos los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos de tolerancia establecidos.